

INSTRUKS

Postnatale genetiske undersøgelser af aborter og dødfødte

Materiale

1. Glas med transportmedium. Rekvireres fra laboratoriet
Klinisk Genetisk Afdeling, tlf. 7845 5557.
Opbevares ved -18°C indtil anvendelse (alm. fryser).
Holdbarhed: Se udløbsdato på transportmediet.
2. Steril saks eller skalpel.
3. Steril pincet.

Prøvetagning

(Skal foregå sterilt og mediet skal være helt optøet)

A. Spontane aborter

- 1) Achillessenebiopsi
- 2) Sikkert identificerbare fosterdele
- 3) Villi chorii

B. Provokerede aborter

Ved prostaglandininducerede aborter er achillessenebiopsi (se vejledning på bagsiden) at foretrække. I øvrigt villi chorii eller amnionvæske

C. Macereret foster eller tom hindsæk

Hvis såvel achillessene eller andre sikkert identificerbare fosterdele er uanvendelige pga. maceration: villi chorii eller amnionvæske

Opbevaring

Efter prøvetagning skal transportglas med biopsien opbevares ved +4°C til forsendelse (må under ingen omstændigheder komme under 0°C).

Forsendelse

Hverdage: Snarest muligt med Falck eller post.

Weekend og helligdage: Opbevares som ovenfor beskrevet til forsendelse til modtagelse første hverdags morgen.

Prøven sendes med rekvisitionssedlen "Postnatale genetiske undersøgelser" (udfyldes omhyggeligt), som findes på hjemmesiden:

<http://www.skejby.dk/afdelinger/klinisk+genetisk+afdeling/fagfolk/rekvisitionssedler+og+instrukser>

Forud for forsendelsen ringes til laboratoriet på tlf. 7845 5557.

midt
regionmidtjylland

Dato : _____

Sagsbehandler : KGA lab.

Direkte tel. : +45 7845 5557

Telefax: +45 8678 3461

Side 1/2

Udtagning af achillessene til kromosomundersøgelse

Ved udtagningen benyttes:

2 sterile pincetter

2 sterile, spidse, buede sakse

2 sterile skalpeller

Alkohol (60-99%)

Transportmedium (*helt optøet*) fra
Klinisk Genetisk Afdeling

1. Steriliser huden ved at hælde lidt alkohol over fostrets fod, hæl og underben. Lad alkoholen fordampe.

2. Lav med steril skalpel en relativ lang incision i huden, så der er god plads til at fridissekere achillessenen (fig. 1).

Undgå at lædere fodsålen.

3. Læg achillessenen fri (fig. 2).

Løft den op med pincetten.

4. Klip først senen over lige ved muskelovergangen (fig. 3).

5. Klip derefter senen af så nært som muligt ved insertionen på calcaneus – uden at pincettens greb i achillessenen løsnes (fig. 4).

6. Achillessenen overføres til det sterile transportmedium. Undgå at røre transportglasset under denne procedure.

7. Den anden achillessene udtages på samme vis.

Begge achillessener kan transporteres i det samme glas.

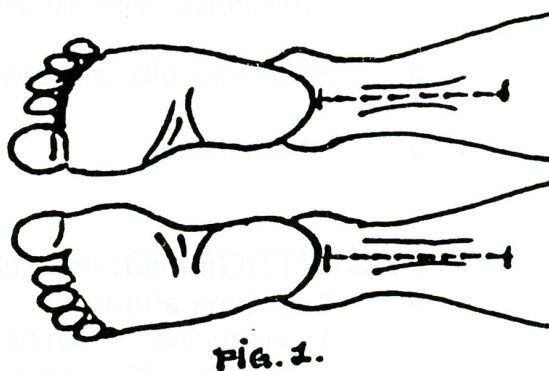


Fig. 1.



Fig. 2.

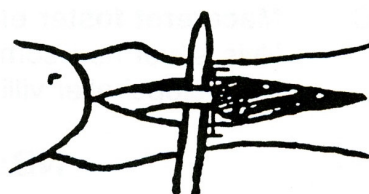


Fig. 3.



Fig. 4.